

CATALOGUE
DE VENTE
DES IMPLANTS
MAMMAIRES
CereForm[®]



Euromi Biosciences souhaite apporter un regard nouveau sur les implants mammaires remplis de gel de silicone et vous propose une gamme complète, aux textures et gels variés, afin de répondre au mieux aux besoins de vos patientes.

Un regard neuf, mais aussi l'expérience du médical, de la chirurgie esthétique et plastique depuis 25 ans.

Euromi Biosciences fait partie d'un groupe spécialisé depuis 25 ans dans les dispositifs médicaux. Elle compte bénéficier de l'expertise de l'entreprise française Cerecare, spécialisée dans les vêtements compressifs et les pansements siliconés, et de l'entreprise belge Euromi, qui est un acteur majeur dans le domaine de la liposuction, du lipofilling et de la mésothérapie.



SOMMAIRE

LES IMPLANTS Ronds	06
CEREFORM® CLASSIQUE	08
CEREFORM® APTIMA	10
Tableau de tailles CEREFORM® CLASSIQUE & APTIMA	12
CEREFORM® ELLIPSE	14
Tableau de tailles CEREFORM® ELLIPSE	16
 PROPRIÉTÉS, SÉCURITÉ, ASSURANCE QUALITÉ	 19

LES IMPLANTS MAMMAIRES RONDS

Apportent du volume sur la partie supérieure du sein et façonnent une poitrine pigeonnante

Conviennent aux femmes qui ont déjà des seins légèrement formés

Surface
micro-
texturée

Surface
Lisse

Pour effectuer une sélection en parfaite adéquation avec la morphologie et les désirs de votre patiente :

5 PROFILS



BAS



MOYEN



INTERMÉDIAIRE



HAUT



TRÈS HAUT

DIFFÉRENTS VOLUMES

- ✓ De 100 à 500cc pour les profils bas
- ✓ De 100 à 700cc pour les profils moyens
- ✓ De 150 à 500cc pour les profils intermédiaires
- ✓ De 125 à 700cc pour les profils hauts
- ✓ De 130 à 900cc pour les profils très hauts



Volumes supérieurs à 500cc = Disponibles sur demande et soumis à un supplément de prix.

2 SURFACES

Lisse

Micro-texturée

3 GELS DE REMPLISSAGE

Cereform®
Classique

Cereform®
Aptima

Cereform®
Ellipse

CEREFORM® CLASSIQUE

PROFILS

PROFIL BAS Round Low (RL)

Volume de 100 à 500 cc

Projection
de 2,2 cm
à 4,2 cm

Diamètre
de 9,2 cm
à 15,3 cm

PROFIL MOYEN Round Medium (RM)

Volume de 100 à 700 cc

Projection
de 2,4 cm
à 5,7 cm

Diamètre
de 8,9 cm
à 16,0 cm

RÉFÉRENCES

Volumes supérieurs à 500cc, disponibles sur commande, avec un supplément de prix

PROFIL BAS Round Low (RL)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
100	2,2	9,2	RLS100	RLMV100
125	2,4	9,9	RLS125	RLMV125
150	2,5	10,4	RLS150	RLMV150
175	2,7	11,0	RLS175	RLMV175
200	2,8	11,4	RLS200	RLMV200
220	3,0	11,8	RLS220	RLMV220
240	3,1	12,1	RLS240	RLMV240
260	3,2	12,4	RLS260	RLMV260
280	3,3	12,7	RLS280	RLMV280
300	3,4	13	RLS300	RLMV300
325	3,6	13,3	RLS325	RLMV325
350	3,7	13,6	RLS350	RLMV350
400	3,9	14,2	RLS400	RLMV400
450	4,0	14,8	RLS450	RLMV450
500	4,2	15,3	RLS500	RLMV500

PROFIL MOYEN Round Medium (RM)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
100	2,4	8,9	RMS100	RMMV100
125	2,6	9,6	RMS125	RMMV125
150	2,8	10,1	RMS150	RMMV150
175	3,0	10,6	RMS175	RMMV175
200	3,2	11,0	RMS200	RMMV200
220	3,3	11,4	RMS220	RMMV220
240	3,5	11,6	RMS240	RMMV240
260	3,7	11,9	RMS260	RMMV260
280	3,8	12,2	RMS280	RMMV280
300	4,0	12,5	RMS300	RMMV300
325	4,1	12,8	RMS325	RMMV325
350	4,3	13,1	RMS350	RMMV350
375	4,4	13,3	RMS375	RMMV375
400	4,6	13,6	RMS400	RMMV400
450	4,8	14,1	RMS450	RMMV450
500	5,0	14,6	RMS500	RMMV500
550	5,1	14,9	RMS550	RMMV550
600	5,3	15,3	RMS600	RMMV600
650	5,5	15,7	RMS650	RMMV650
700	5,7	16,0	RMS700	RMMV700

Gamme de prothèses mammaires au gel de silicone cohésif offrant un toucher naturel.

PROFIL INTERMÉDIAIRE Round Intermediate (RI)

Volume de 150 à 500 cc



Projection
de 3,0 cm
à 5,2 cm



Diamètre
de 9,6 cm
à 13,9 cm

PROFIL HAUT Round High (RH)

Volume de 125 à 700 cc




Projection
de 3,0 cm
à 6,4 cm



Diamètre
de 8,8 cm
à 14,9 cm

PROFIL TRÈS HAUT Round Very High (RVH)

Volume de 130 à 900 cc

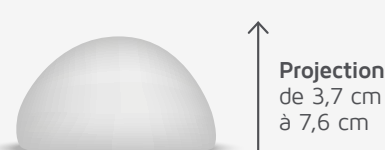

Projection
de 3,7 cm
à 7,6 cm



Diamètre
de 8,2 cm
à 15,0 cm

PROFIL INTERMÉDIAIRE Round Intermediate (RI)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
150	3,0	9,6	RIS150	RIMV150
175	3,3	10,1	RIS175	RIMV175
200	3,5	10,5	RIS200	RIMV200
225	3,7	10,9	RIS225	RIMV225
250	3,9	11,2	RIS250	RIMV250
275	4,0	11,5	RIS275	RIMV275
300	4,2	11,9	RIS300	RIMV300
325	4,3	12,1	RIS325	RIMV325
350	4,5	12,4	RIS350	RIMV350
375	4,6	12,7	RIS375	RIMV375
400	4,7	12,9	RIS400	RIMV400
450	5,0	13,4	RIS450	RIMV450
500	5,2	13,9	RIS500	RIMV500

PROFIL HAUT Round High (RH)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
125	3,0	8,8	RHS125	RHMH125
150	3,2	9,3	RHS150	RHMH150
175	3,5	9,8	RHS175	RHMH175
200	3,7	10,2	RHS200	RHMH200
225	3,9	10,5	RHS225	RHMH225
250	4,1	10,9	RHS250	RHMH250
275	4,3	11,2	RHS275	RHMH275
300	4,5	11,5	RHS300	RHMH300
325	4,6	11,8	RHS325	RHMH325
350	4,8	12,1	RHS350	RHMH350
375	4,9	12,3	RHS375	RHMH375
400	5,0	12,6	RHS400	RHMH400
425	5,2	12,7	RHS425	RHMH425
450	5,3	13,0	RHS450	RHMH450
500	5,5	13,4	RHS500	RHMH500
550	5,7	13,8	RHS550	RHMH550
600	5,9	14,2	RHS600	RHMH600
650	6,1	14,6	RHS650	RHMH650
700	6,4	14,9	RHS700	RHMH700

PROFIL TRÈS HAUT Round Very High (RVH)


Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
130	3,7	8,2	RVHS130	RVHMH130
160	4,0	8,7	RVHS160	RVHMH160
190	4,2	9,2	RVHS190	RVHMH190
220	4,5	9,6	RVHS220	RVHMH220
250	4,8	10,0	RVHS250	RVHMH250
280	4,9	10,3	RVHS280	RVHMH280
310	5,2	10,6	RVHS310	RVHMH310
340	5,4	10,9	RVHS340	RVHMH340
370	5,5	11,2	RVHS370	RVHMH370
400	5,7	11,5	RVHS400	RVHMH400
450	6,0	11,9	RVHS450	RVHMH450
500	6,3	12,3	RVHS500	RVHMH500
550	6,4	12,6	RVHS550	RVHMH550
600	6,6	12,9	RVHS600	RVHMH600
650	6,8	13,2	RVHS650	RVHMH650
700	7,1	13,5	RVHS700	RVHMH700
750	7,3	13,8	RVHS750	RVHMH750
800	7,5	14,1	RVHS800	RVHMH800
900	7,6	15,0	RVHS900	RVHMH900

CEREFORM® APTIMA

PROFILS


PROFIL BAS Round Low (RL)

Volume de 100 à 500 cc

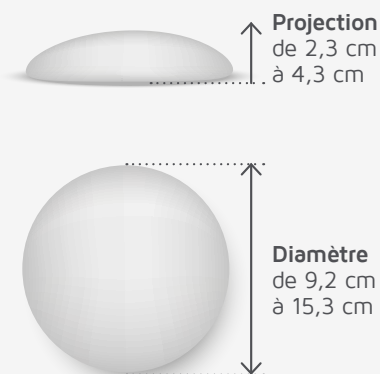

PROFIL MOYEN Round Medium (RM)

Volume de 100 à 700 cc

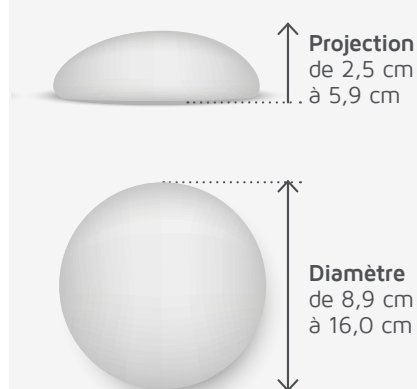

RÉFÉRENCES

Volumes supérieurs à 500cc, disponibles
sur commande, avec un supplément de prix

PROFIL BAS Round Low (RL)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro- texturée
100	2,3	9,2	RLS100+	RLMV100+
125	2,5	9,9	RLS125+	RLMV125+
150	2,6	10,4	RLS150+	RLMV150+
175	2,8	11,0	RLS175+	RLMV175+
200	2,9	11,4	RLS200+	RLMV200+
220	3,1	11,8	RLS220+	RLMV220+
240	3,2	12,1	RLS240+	RLMV240+
260	3,3	12,4	RLS260+	RLMV260+
280	3,4	12,7	RLS280+	RLMV280+
300	3,5	13,0	RLS300+	RLMV300+
325	3,7	13,3	RLS325+	RLMV325+
350	3,8	13,6	RLS350+	RLMV350+
400	4,0	14,2	RLS400+	RLMV400+
450	4,2	14,8	RLS450+	RLMV450+
500	4,3	15,3	RLS500+	RLMV500+

PROFIL MOYEN Round Medium (RM)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro- texturée
100	2,5	8,9	RMS100+	RMMV100+
125	2,7	9,6	RMS125+	RMMV125+
150	2,9	10,1	RMS150+	RMMV150+
175	3,1	10,6	RMS175+	RMMV175+
200	3,3	11,0	RMS200+	RMMV200+
220	3,4	11,4	RMS220+	RMMV220+
240	3,6	11,6	RMS240+	RMMV240+
260	3,8	11,9	RMS260+	RMMV260+
280	3,9	12,2	RMS280+	RMMV280+
300	4,1	12,5	RMS300+	RMMV300+
325	4,3	12,8	RMS325+	RMMV325+
350	4,4	13,1	RMS350+	RMMV350+
375	4,5	13,3	RMS375+	RMMV375+
400	4,7	13,6	RMS400+	RMMV400+
450	5,0	14,1	RMS450+	RMMV450+
500	5,2	14,6	RMS500+	RMMV500+
550	5,3	14,9	RMS550+	RMMV550+
600	5,5	15,3	RMS600+	RMMV600+
650	5,7	15,7	RMS650+	RMMV650+
700	5,9	16,0	RMS700+	RMMV700+

Gamme de prothèses mammaires au gel de silicone plus cohésif que la gamme classique offrant une meilleure tenue de l'implant. Permet de proposer à votre patiente, à diamètre égal, des projections un peu plus importantes.


PROFIL INTERMÉDIAIRE

Round Intermediate (RI)

Volume de 150 à 500 cc



Projection
de 3,2 cm
à 5,5 cm

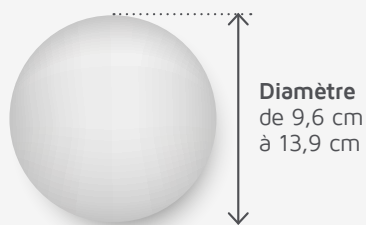


Diamètre
de 9,6 cm
à 13,9 cm

PROFIL HAUT

Round High (RH)

Volume de 125 à 700 cc

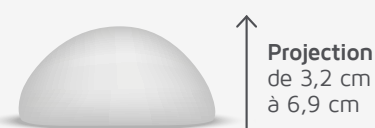

Projection
de 3,2 cm
à 6,9 cm




Diamètre
de 8,8 cm
à 14,9 cm

PROFIL TRÈS HAUT

Round Very High (RVH)

Volume de 130 à 900 cc

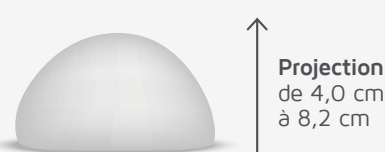

Projection
de 4,0 cm
à 8,2 cm



Diamètre
de 8,2 cm
à 15,0 cm

PROFIL INTERMÉDIAIRE

Round Intermediate (RI)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
150	3,2	9,6	RIS150+	RIMV150+
175	3,5	10,1	RIS175+	RIMV175+
200	3,7	10,5	RIS200+	RIMV200+
225	3,9	10,9	RIS225+	RIMV225+
250	4,1	11,2	RIS250+	RIMV250+
275	4,2	11,5	RIS275+	RIMV275+
300	4,4	11,9	RIS300+	RIMV300+
325	4,5	12,1	RIS325+	RIMV325+
350	4,7	12,4	RIS350+	RIMV350+
375	4,8	12,7	RIS375+	RIMV375+
400	5,0	12,9	RIS400+	RIMV400+
450	5,2	13,4	RIS450+	RIMV450+
500	5,5	13,9	RIS500+	RIMV500+

PROFIL HAUT

Round High (RH)


Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
125	3,2	8,8	RHS125+	RHMOV125+
150	3,4	9,3	RHS150+	RHMOV150+
175	3,7	9,8	RHS175+	RHMOV175+
200	3,9	10,2	RHS200+	RHMOV200+
225	4,2	10,5	RHS225+	RHMOV225+
250	4,4	10,9	RHS250+	RHMOV250+
275	4,6	11,2	RHS275+	RHMOV275+
300	4,8	11,5	RHS300+	RHMOV300+
325	5,0	11,8	RHS325+	RHMOV325+
350	5,1	12,1	RHS350+	RHMOV350+
375	5,3	12,3	RHS375+	RHMOV375+
400	5,4	12,6	RHS400+	RHMOV400+
425	5,6	12,7	RHS425+	RHMOV425+
450	5,7	13,0	RHS450+	RHMOV450+
500	6,0	13,4	RHS500+	RHMOV500+
550	6,1	13,8	RHS550+	RHMOV550+
600	6,3	14,2	RHS600+	RHMOV600+
650	6,6	14,6	RHS650+	RHMOV650+
700	6,9	14,9	RHS700+	RHMOV700+

PROFIL TRÈS HAUT

Round Very High (RVH)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
130	4,0	8,2	RVHS130+	RVHMOV130+
160	4,4	8,7	RVHS160+	RVHMOV160+
190	4,6	9,2	RVHS190+	RVHMOV190+
220	4,9	9,6	RVHS220+	RVHMOV220+
250	5,3	10,0	RVHS250+	RVHMOV250+
280	5,4	10,3	RVHS280+	RVHMOV280+
310	5,7	10,6	RVHS310+	RVHMOV310+
340	5,9	10,9	RVHS340+	RVHMOV340+
370	6,0	11,2	RVHS370+	RVHMOV370+
400	6,3	11,5	RVHS400+	RVHMOV400+
450	6,6	11,9	RVHS450+	RVHMOV450+
500	6,8	12,3	RVHS500+	RVHMOV500+
550	7,0	12,6	RVHS550+	RVHMOV550+
600	7,2	12,9	RVHS600+	RVHMOV600+
650	7,4	13,2	RVHS650+	RVHMOV650+
700	7,7	13,5	RVHS700+	RVHMOV700+
750	7,9	13,8	RVHS750+	RVHMOV750+
800	8,1	14,1	RVHS800+	RVHMOV800+
900	8,2	15,0	RVHS900+	RVHMOV900+

TABLEAU RÉCAPITULATIF **IMPLANTS**

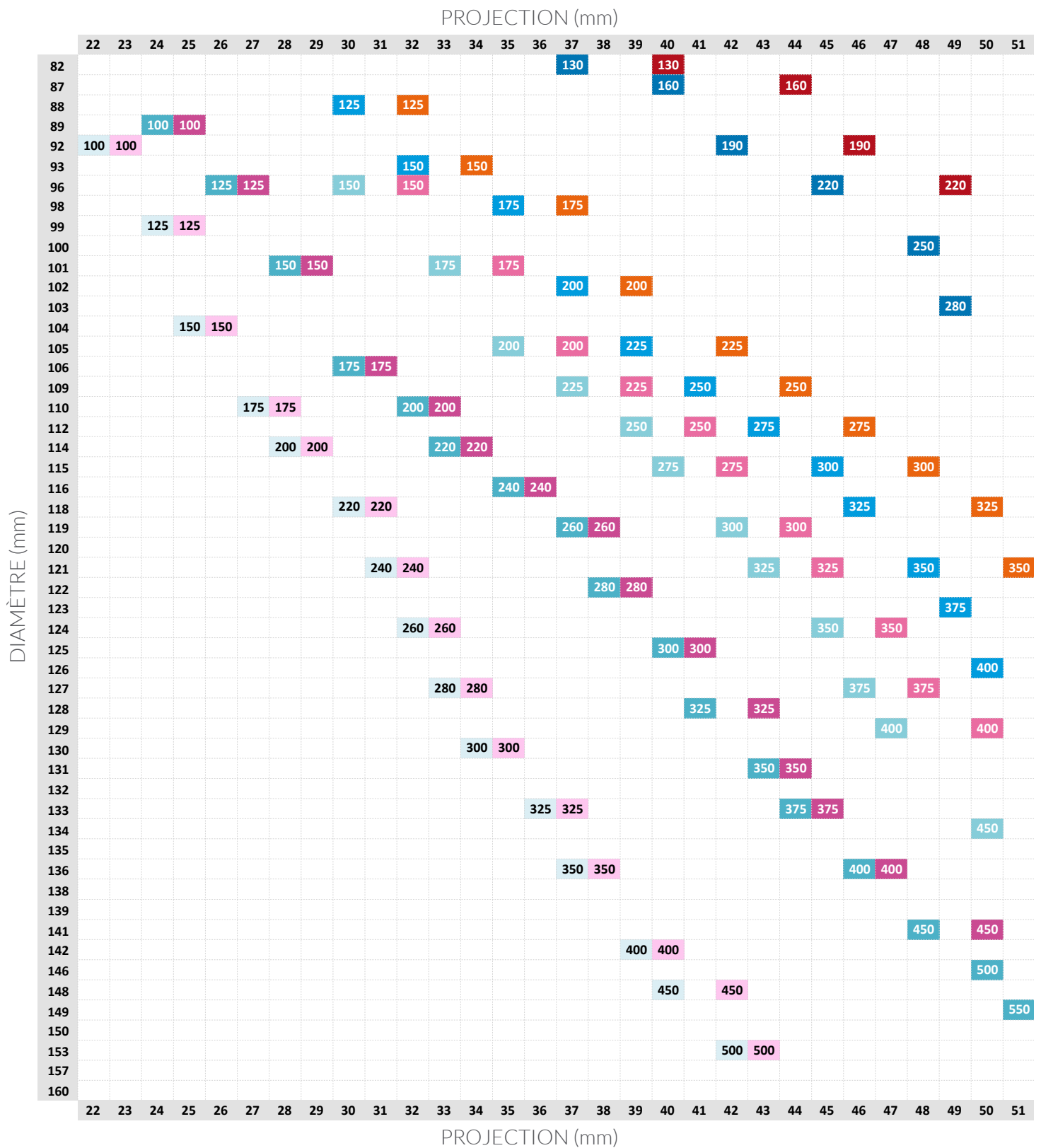

IMPLANTS CEREFORM® CLASSIQUE

PROFIL BAS (RL)


PROFIL MOYEN (RM)

PROFIL INTERMEDIAIRE (RI)

PROFIL HAUT (RH)

PROFIL TRÈS HAUT (RVH)

MAMMAIRES CLASSIQUE & APTIMA

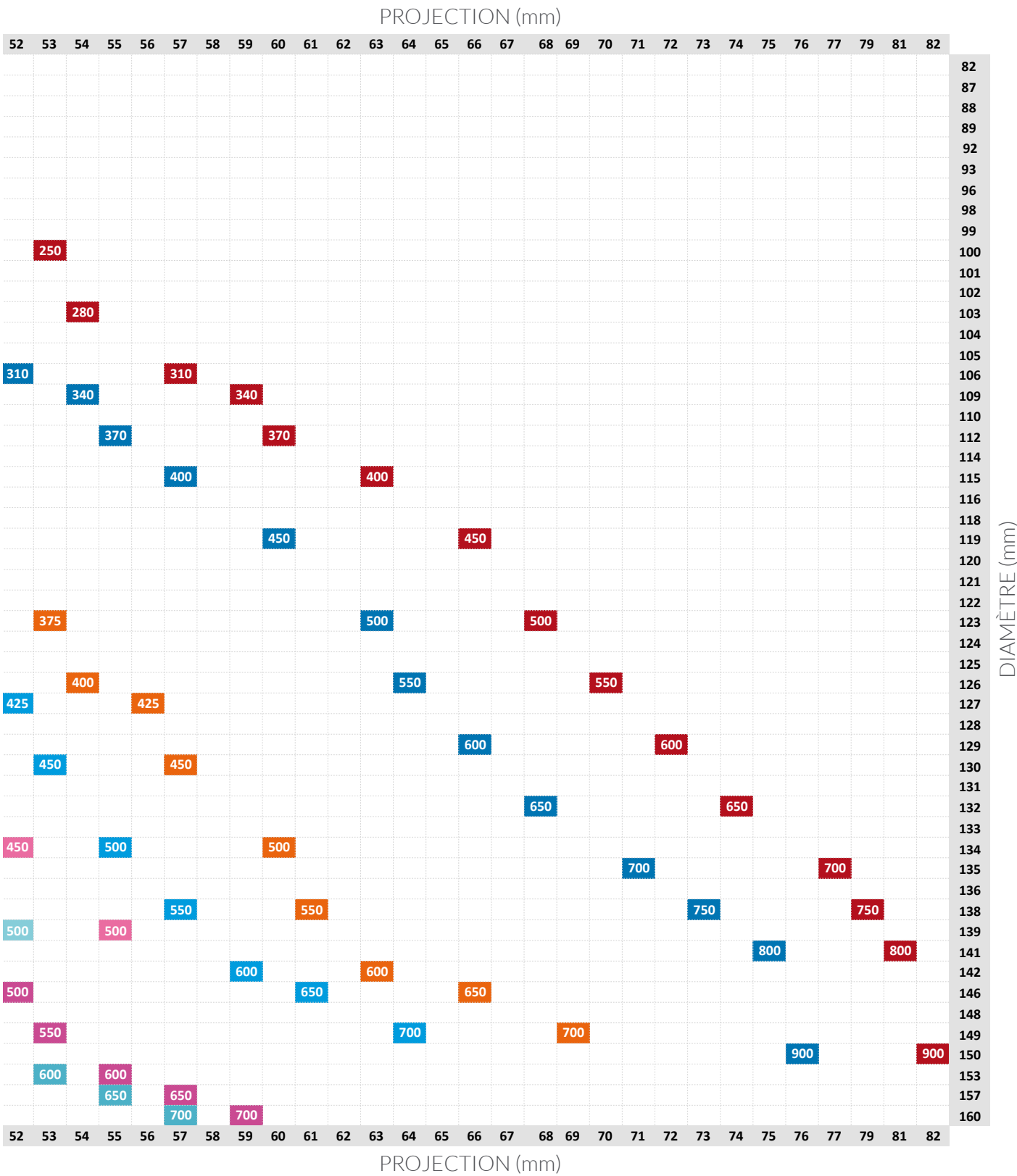

IMPLANTS CEREFORM®
APTIMA

PROFIL BAS (RL+)

PROFIL MOYEN (RM+)

PROFIL INTERMEDIAIRE (RI+)

PROFIL HAUT (RH+)

PROFIL TRÈS HAUT (RVH+)

CEREFORM® ELLIPSE

PROFILS

PROFIL BAS Round Low (RL)

Volume de 100 à 500 cc

Projection
de 2,2 cm
à 4,2 cm

Diamètre
de 9,2 cm
à 15,3 cm

PROFIL MOYEN Round Medium (RM)

Volume de 100 à 700 cc

Projection
de 2,6 cm
à 6,2 cm

Diamètre
de 9,0 cm
à 16,1 cm

RÉFÉRENCES

Volumes supérieurs à 500cc, disponibles sur commande, avec un supplément de prix

PROFIL BAS Round Low (RL)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
100	2,2	9,2	RLS100E	RLMV100E
125	2,4	9,9	RLS125E	RLMV125E
150	2,5	10,4	RLS150E	RLMV150E
175	2,7	11,0	RLS175E	RLMV175E
200	2,9	11,5	RLS200E	RLMV200E
220	3,0	11,8	RLS220E	RLMV220E
240	3,1	12,1	RLS240E	RLMV240E
260	3,2	12,6	RLS260E	RLMV260E
280	3,3	12,8	RLS280E	RLMV280E
300	3,4	13,1	RLS300E	RLMV300E
325	3,6	13,3	RLS325E	RLMV325E
350	3,7	13,6	RLS350E	RLMV350E
400	3,9	14,2	RLS400E	RLMV400E
450	4,0	14,8	RLS450E	RLMV450E
500	4,2	15,3	RLS500E	RLMV500E


PROFIL MOYEN Round Medium (RM)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
100	2,6	9,0	RMS100E	RMMV100E
125	2,9	9,6	RMS125E	RMMV125E
150	3,0	10,2	RMS150E	RMMV150E
175	3,3	10,8	RMS175E	RMMV175E
200	3,4	11,1	RMS200E	RMMV200E
220	3,6	11,4	RMS220E	RMMV220E
240	3,7	11,6	RMS240E	RMMV240E
260	3,8	11,9	RMS260E	RMMV260E
280	3,9	12,2	RMS280E	RMMV280E
300	4,1	12,5	RMS300E	RMMV300E
325	4,3	12,8	RMS325E	RMMV325E
350	4,4	13,0	RMS350E	RMMV350E
375	4,5	13,4	RMS375E	RMMV375E
400	4,6	13,6	RMS400E	RMMV400E
450	4,8	14,2	RMS450E	RMMV450E
500	5,4	14,7	RMS500E	RMMV500E
550	5,5	15,0	RMS550E	RMMV550E
600	5,7	15,2	RMS600E	RMMV600E
650	5,9	15,8	RMS650E	RMMV650E
700	6,2	16,1	RMS700E	RMMV700E

Gamme de prothèses mammaires offrant un gel de silicone encore plus résistant à la rupture. L'adhérence à l'enveloppe est maximale, le toucher plus souple et l'excellente mémoire de forme permet une insertion plus facile.

PROFIL INTERMÉDIAIRE Round Intermediate (RI)

Volume de 150 à 500 cc

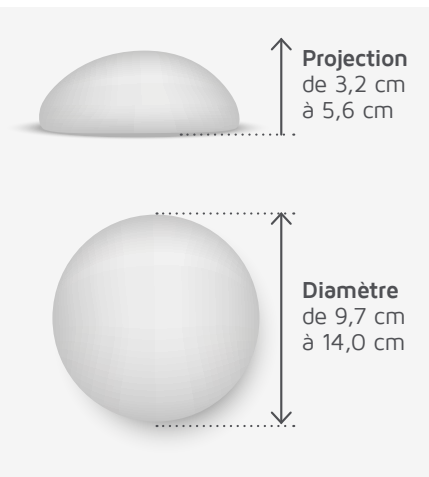


PROFIL HAUT Round High (RH)

Volume de 125 à 700 cc



PROFIL TRÈS HAUT Round Very High (RVH)

Volume de 130 à 900 cc

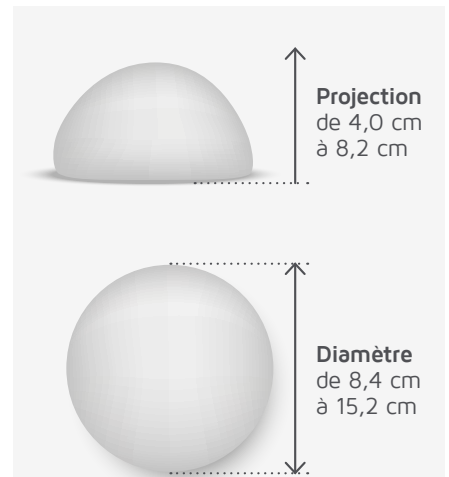

PROFIL INTERMÉDIAIRE Round Intermediate (RI)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
150	3,2	9,7	RIS150E	RIMV150E
175	3,5	10,1	RIS175E	RIMV175E
200	3,7	10,5	RIS200E	RIMV200E
225	3,9	11,0	RIS225E	RIMV225E
250	4,1	11,3	RIS250E	RIMV250E
275	4,3	11,6	RIS275E	RIMV275E
300	4,5	12,0	RIS300E	RIMV300E
325	4,6	12,2	RIS325E	RIMV325E
350	4,6	12,4	RIS350E	RIMV350E
375	4,9	12,8	RIS375E	RIMV375E
400	5,0	13,0	RIS400E	RIMV400E
450	5,3	13,5	RIS450E	RIMV450E
500	5,6	14,0	RIS500E	RIMV500E


PROFIL HAUT Round High (RH)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
125	3,3	8,8	RHS125E	RHMV125E
150	3,6	9,4	RHS150E	RHMV150E
175	3,7	9,9	RHS175E	RHMV175E
200	4,0	10,2	RHS200E	RHMV200E
225	4,3	10,6	RHS225E	RHMV225E
250	4,4	10,8	RHS250E	RHMV250E
275	4,6	11,2	RHS275E	RHMV275E
300	4,8	11,5	RHS300E	RHMV300E
325	5,0	11,7	RHS325E	RHMV325E
350	5,2	12,0	RHS350E	RHMV350E
375	5,3	12,2	RHS375E	RHMV375E
400	5,4	12,5	RHS400E	RHMV400E
425	5,6	12,8	RHS425E	RHMV425E
450	5,7	13,0	RHS450E	RHMV450E
500	5,9	13,4	RHS500E	RHMV500E
550	5,8	14,0	RHS550E	RHMV550E
600	6,0	14,4	RHS600E	RHMV600E
650	6,3	14,8	RHS650E	RHMV650E
700	6,6	15,1	RHS700E	RHMV700E

PROFIL TRÈS HAUT Round Very High (RVH)

Volume (cc)	Projection (cm)	Diamètre (cm)	Référence lisse	Référence micro-texturée
130	4,0	8,4	RVHS130E	RVHMV130E
160	4,4	8,9	RVHS160E	RVHMV160E
190	4,8	9,4	RVHS190E	RVHMV190E
220	4,9	9,8	RVHS220E	RVHMV220E
250	5,3	10,2	RVHS250E	RVHMV250E
280	5,7	10,5	RVHS280E	RVHMV280E
310	5,7	10,8	RVHS310E	RVHMV310E
340	6,0	11,1	RVHS340E	RVHMV340E
370	6,3	11,4	RVHS370E	RVHMV370E
400	6,5	11,7	RVHS400E	RVHMV400E
450	6,8	12,1	RVHS450E	RVHMV450E
500	7,0	12,5	RVHS500E	RVHMV500E
550	7,1	12,7	RVHS550E	RVHMV550E
600	7,2	13,1	RVHS600E	RVHMV600E
650	7,5	13,3	RVHS650E	RVHMV650E
700	7,7	13,7	RVHS700E	RVHMV700E
750	7,9	13,9	RVHS750E	RVHMV750E
800	8,1	14,3	RVHS800E	RVHMV800E
900	8,2	15,2	RVHS900E	RVHMV900E

TABLEAU RÉCAPITULATIF IMPLANTS

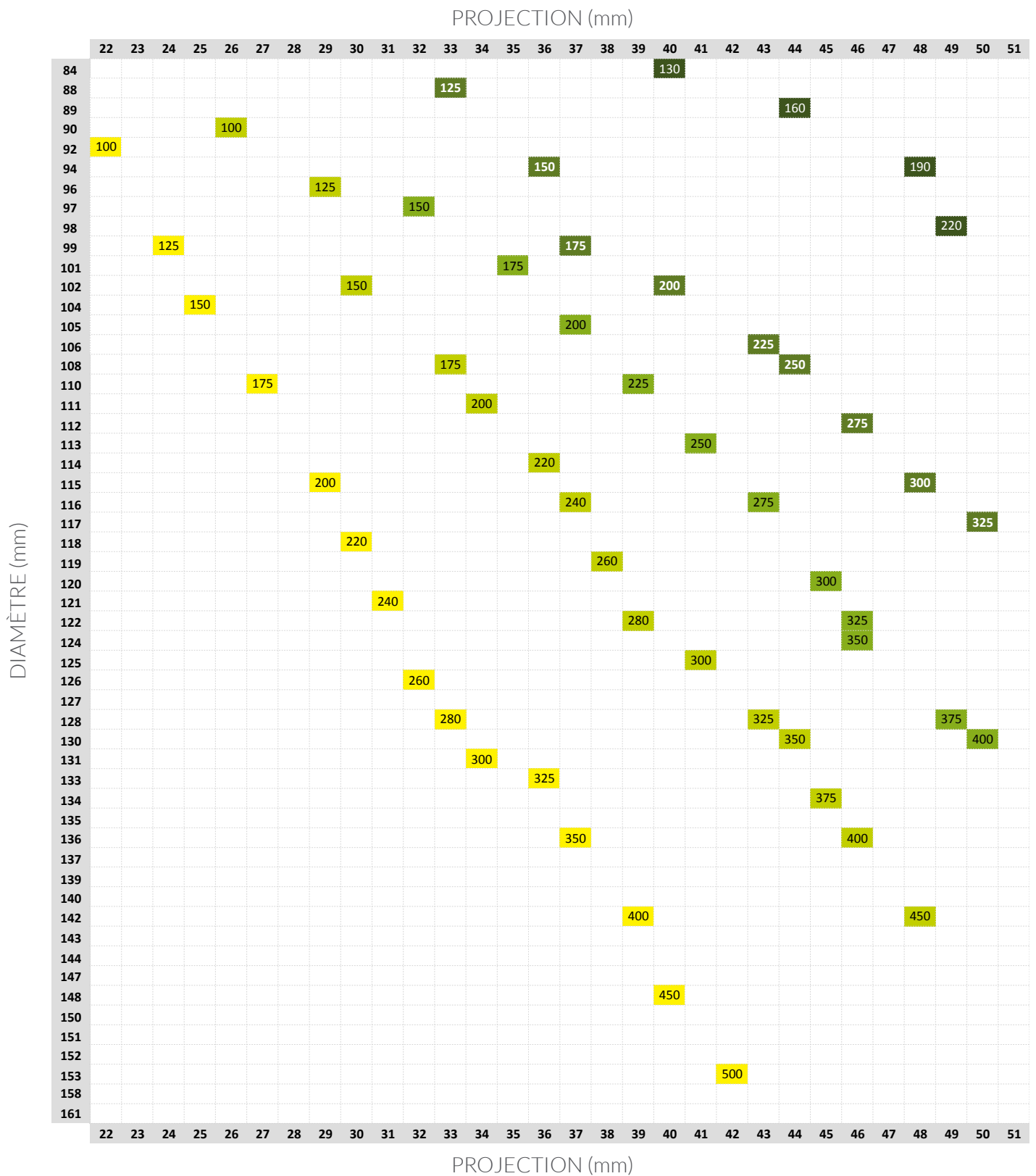

IMPLANTS CEREFORM®
ELLIPSE

PROFIL BAS (RLE)


PROFIL MOYEN (RME)

PROFIL INTERMEDIAIRE (RIE)


PROFIL HAUT (RHE)

PROFIL TRÈS HAUT (RVHE)

MAMMAIRES ELLIPSE

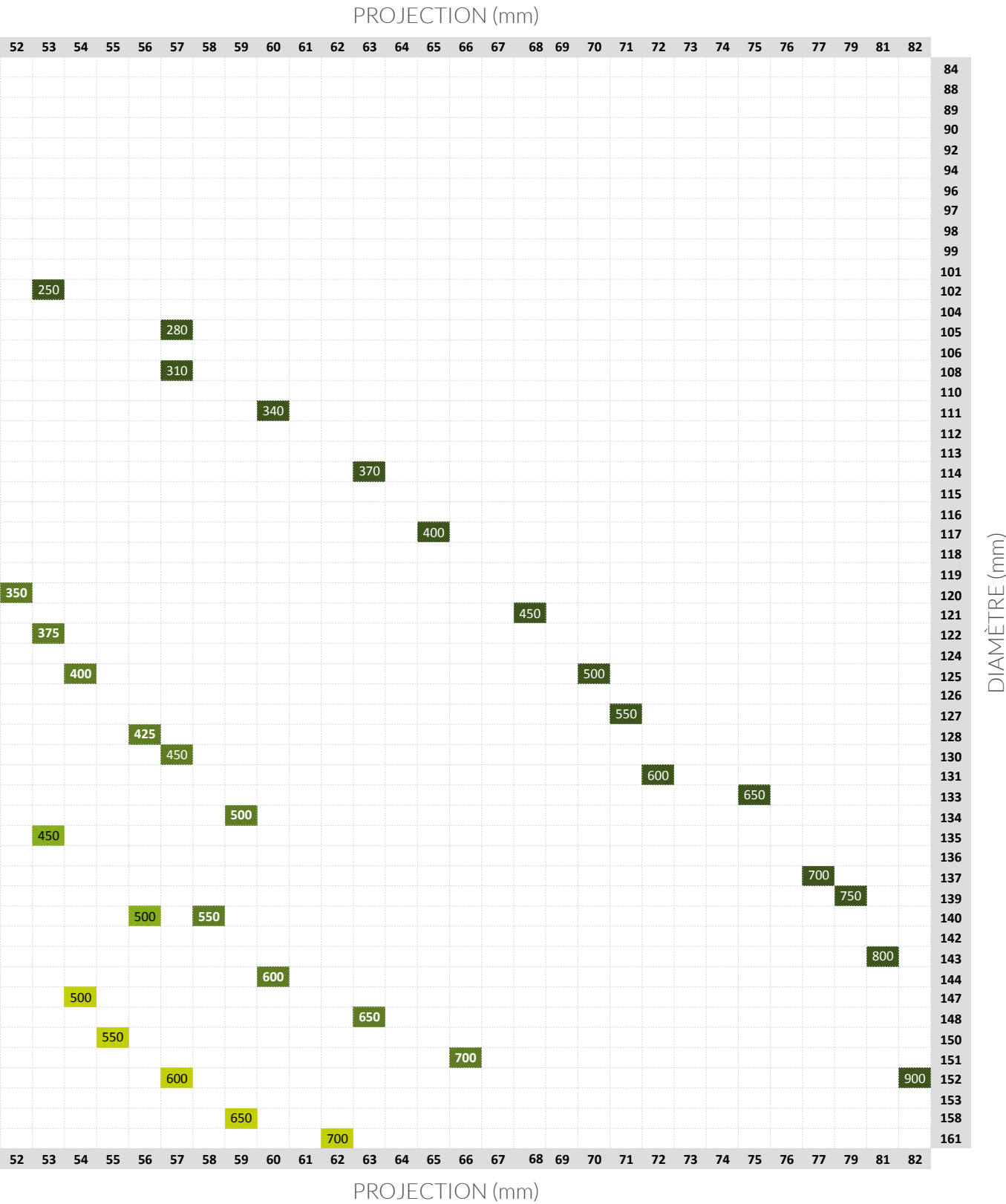



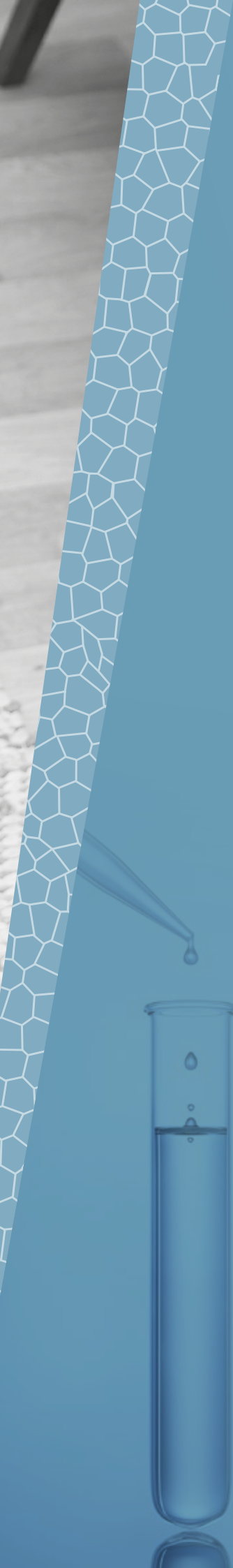

INFOS IMPLANTS

PROPRIÉTÉS & SÉCURITÉ

Les implants mammaires CEREFORM® sont fabriqués avec des silicones de grade médical. Un élastomère de silicone de grade médical, possédant d'excellentes propriétés mécaniques, constitue l'enveloppe trilaminaire pré-remplie de gel de silicone.

Une couche barrière permet de limiter efficacement la perspiration du gel de silicone à travers l'enveloppe. Les implants CEREFORM® intègrent également une couche barrière au niveau du patch.

La formulation spécifique du gel de silicone permet d'obtenir un toucher similaire au sein naturel. La cohésivité du gel assure une mémoire de forme à l'implant et accroît la sécurité du produit.

La soudure imperceptible du patch garantit une occlusion parfaite pour une sécurité optimale.

La méthode de remplissage de l'implant permet d'éliminer les risques de fuite de silicone. Aucune perforation pouvant nuire à l'intégrité de l'enveloppe n'a été réalisée.

ASSURANCE QUALITÉ

La prothèse mammaire CEREFORM® est stérilisée à la chaleur sèche, suivant un cycle validé. Destinée à un usage unique et monopatient, elle est livrée sous double emballage, assurant une barrière microbiologique optimale jusqu'à l'implantation.

Chaque implant comporte un numéro de série gravé sur le patch d'occlusion, qui assure une traçabilité parfaite.

La prothèse CEREFORM® est fabriquée et conditionnée selon les normes EN ISO 13485 et EN ISO 14607. Les implants mammaires sont des dispositifs médicaux implantables de classe III et sont conformes à la réglementation européenne. Ils sont destinés à être utilisés en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice.

Les implants mammaires d'Euromi Biosciences sont marqués CE par l'organisme notifié BSI numéro 2797.



EUROMI BIOSCIENCES

Zoning Industriel des Plenneses
11 rue des Nouvelles Technologies
4821 Andrimont (BE)

☎ Tel : +32(0) 87 29 22 22

🌐 www.euromi-biosciences.com

✉ info@euromi-biosciences.com

